

GB ① Start curing process in hot water + Maintain water temperature ② Stop curing + Air cooling to ambient temperature ③ End of total curing process

NL ① Start polymerisatie proces in heet water + Handhaaf watertemperatuur ② Stop polymerisatie + Luchtkoeling tot kamertemperatuur ③ Eind totale polymerisatieproces

D ① Begin Aushärtungsprozess in heißem Wasser + Beibehaltung Wassertemperatur ② Stopp Aushärtung + Luftkühlung auf Umgebungstemperatur ③ Ende des gesamten Aushärtungsprozesses

F ① Début du processus de traitement dans l'eau chaude + Maintien de la température de l'eau ② Fin du traitement + Refroidissement de l'air à la température ambiante ③ Fin de l'ensemble du processus de traitement

E ① Inicie el proceso de polimerización en agua caliente + Mantenga la temperatura del agua ② Suspenda la polimerización + Enfrie el aire hasta la temperatura ambiente ③ Fin de todo el proceso de polimerización

P ① Inicie a cura em água quente + Mantenha a temperatura da água ② Pare a cura + Arrefecimento a ar até à temperatura ambiente ③ Fim da cura total

I ① Avviare il processo di polimerizzazione in acqua calda + Mantenerne la temperatura dell'acqua ② Interrrompere la polimerizzazione + Il raffreddamento ad aria a temperatura ambiente ③ Fine dell'intero processo di polimerizzazione

M ① Ibda l-process tal-kura fl-ilma shun + Žomm it-temperatura ta' l-ilma stabbl ② Waqqaf il-kura + Halli jiksah sat-temperatura tal-madwar ③ Tmiem tal-process tal-kura totali

DK ① Start härningsprocessen i varmt vand + Bibehold vandtemperatur ② Stop härning + Luftnedkøling til stuetemperatur ③ Afslutning af hele härningsprocessen

N ① Start konserveringsprosessen i varmt vann + Oppretthold vanntemperaturen ② Stans konservering + Luftkjøling til romtemperatur ③ Slutt på hele konserveringsprosessen

S ① Starta hårdningsprocessen i hett vatten + Underhåll vattentemperaturen ② Stoppa hårdning + Luftlyft på omgivningstemperatur ③ Slut på hårdningsprocessen

FIN ① Aloita kypsittämisen kuumassa vedessä + Säilytä veden lämpötila ② Lopeta kypsittämisen + Jäähytä ilman avulla vastaanamaan lämpötilaan ③ Kypsityksen päättymä

EST ① Alustage raviprotsessi kuumas vees + Säilitage veetemperatuuri ② Löpetage ravi + Õhutemperatuuri langeb ümbritseva keskkonna temperatuurini ③ Löpetage kogu raviprotsess

LV ① Sāciet stīndzināšanas procesu karstā ūdeni + Uzturiet ūdens temperatūru ② Beidziet stīndzināšanu + Dzesējiet gaisu līdz istabas temperatūrai ③ Visa stīndzināšanas procesa beigas

LT ① Pradėkite stingsdymo procesą karštame vandenye + Palaikykite vandens temperatūrą ② Sustabdykite stingsdymą + Aušinkite orą iki kambario temperatūros ③ Viso stingsdymo proceso pabaiga

PL ① Rozpocznij proces utwardzania w cieplej wodzie + Utrzymuj temperaturę wody ② Zatrzymaj utwardzanie + Chłodzenie powietrzem do uzyskania temperatury otoczenia ③ Całkowite zakończenie procesu utwardzania

CZ ① Spusťte proces vytvrzování v horké vodě + Udržujte teplotu vody ② Zastavte vytvrzování + Chlazení vzduchem na okolní teplotu ③ Konec celého procesu vytvrzování

SK ① Spustite proces vytvrdzovania v horúcej vode + Udržujte teplotu vody ② Zastavte vytvrdzovanie + Chladenie vzduchom na okolitú teplotu ③ Koniec celého procesu vytvrdzovania

H ① Kezdeje a polimerizációt meleg vizben + Tartsa a víz hőmérsékletét ② A kötési folyamat véget ér + A levegő szabahőmérséklete hűti az anyagot ③ Befejeződik a teljes kötési folyamat

SLO ① Začni postopek strjevanja v vroči vodi + Vzdržuj temperaturo vode ② Zaključi strjevanje + Hlajenje zraka na temperaturo prostora ③ Zaključek kompletnega postopka strjevanja

RO ① Începeți procesul de tratare în apă fierbinte + Mențineți temperatură apel ② Încetați tratarea + Răcăjiți în aer până la temperatură camerii ③ Finalul întregului proces de tratare


BG ① Начало на процеса на втвърдяване в гореща вода + Поддържане на температура на водата ② Спиране на втвърдяването + Въздушно охаждане до стапна температура ③ Край на целия процес на втвърдяване

GR ① Ξεκινήστε τη διαδικασία σκλήρυνσης σε ζεστό νερό + Διατηρήστε τη θερμοκρασία του νερού ② Τερματίστε τη σκλήρυνση + Αφήστε να ψυχέσει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ③ Ολοκλήρωση της συνολικής διαδικασίας σκλήρυνσης

TR ① Sicak suda sertleştirmeye süresini baflatin + Su sisirisi sabit tutun ② Sertleştirmi bitili + Ortam sıcaklığını dengelemek için klimai çalıflırin ③ Toplam sertleştirmeye iflemi sonu

RUS ① Начните процесс отверждения в горячей воде + Поддерживайте температуру воды ② Прекратите отверждение + Воздушное охаждение до температуры помещения ③ Завершение полного процесса отверждения


J ①温水中で硬化処理を開始する + 水温を維持する ② 硬化を終了する + 周囲温度まで空気冷却 ③すべての硬化処理の終了

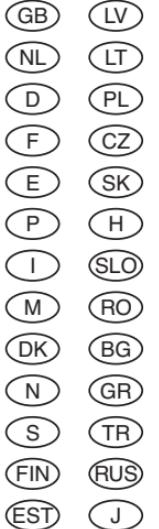

Rapid Simplified





Vertex-Dental B.V.
The Netherlands
+31 (0)30 6976749
www.vertex-dental.com



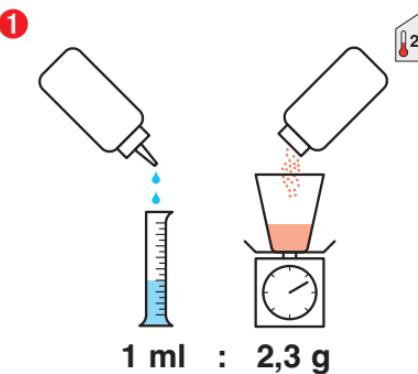

Mix ratio
Mengverhouding
Mischverhältnis
Taux de mixage
Proporción de la mezcla
Proporção de mistura
Rapporto di dosaggio
Proporzion tat-tahilita
Mix ratio
Blandingsforhold
Blandningsförhållande
Sekoitusuhde
Segu vahekord

Maisijuma sastādījumi attiecība
Mišinio komponentu sāntykis
Proporcje mieszanki
Směšovaci pomér
Pomer miešania
Keverési arány
Mešalino razmerje
Raport de amestecare
Смесителна пропорция
Анадолуя сондукън
Kariflim Oran
Пропорция смешивания
混合比率

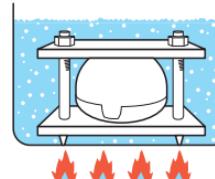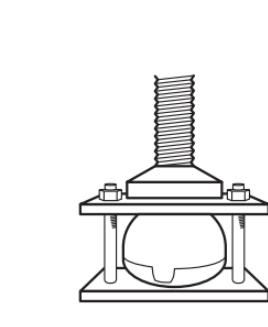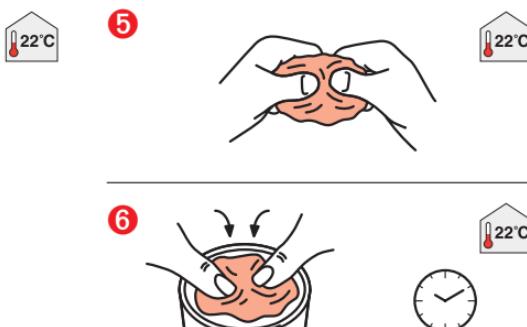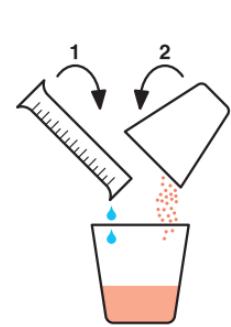

Dough time
Deegtijd
Teigannmiszeit
Temps de fermentation
Tiempo de formación de la masa
Tempo de formação da pasta
Tempo di solidificazione della pasta
Hin biex tiforma l-għażna
Forberedningstid för dejmasse
Deigtid
Degtid
Taikinan käsittelyaika
Täidise aeg

Maisijuma stingšanas laiks
Mišinio stingimo laikas
Czas utwardzania
Čas tvrdení
Čas tvrdnutia
Masszaällapot időtartama
Čas gnetne mase
Perioada de aşteptare
Време на смесване
Хρόνος ζύμωσης
Hamur Süresi
Время смешивания
練り時間

Manual handling time
Handmatige verwerkingstijd
Manuelle Verarbeitungszeit
Temps de traitement manuel
Tiempo de procesamiento manual
Tempo de manuseamento
Tempo di lavorazione manuale
Hin ta' l-immaniġġar manwal
Manuel behandlingstid
Manuell håndteringstid
Manuell hanteringstid
Manualinen käsittelyaika
Käsilaadimise aeg
Uzraudības rokas vadības režīmā laiks

Priēziūros rankinio valdymo režīmu laikas
Czas obróbki ręcznej
Čas ručního zpracování
Čas ručného spracovania
Kézi feloldogzás időtartama
Čas ručne obdelave
Perioada de prelucrare manuală
Время на ръчна обработка
Хрόνος χειρισμού με το χέρι
Elle califittra sūresi
Время ручной обработки
手作業時間